

DESS LIBRARY INSTALLATION



FOR HYBRID ABUTMENTS, CROWNS, BRIDGES AND BARS

INSTALLATIONSANLEITUNG DER DESS BIBLIOTHEKEN


Für Hybrid-Abutments, Kronen, Brücken und Stegen

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LAS LIBRERÍAS DESS

Para aditamentos híbridos, coronas, puentes y barras

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DESS

Pour piliers hybrides, couronnes, ponts et barres

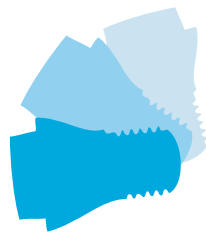


DESS

> DENTAL SMART SOLUTIONS

DESS LIBRARY INSTALLATION 3shape


1

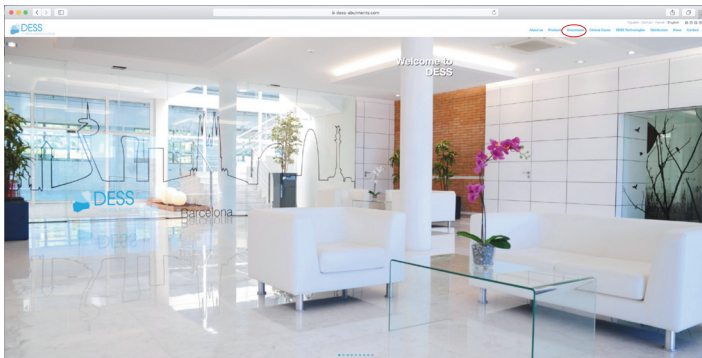

- ENG** Go to our website www.dess-abutments.com, once inside, select the download section.
- DEU** Gehen Sie auf unsere Website www.dess-abutments.com, sobald Sie sich dort befinden, wählen Sie den Download-Bereich.
- ESP** Vaya a nuestra página web www.dess-abutments.com, una vez dentro, seleccione la sección de descargas.
- FR** Rendez-vous sur notre site www.dess-abutments.com, une fois à l'intérieur, sélectionnez la section de téléchargement.


2

CAD CAM LIBRARIES

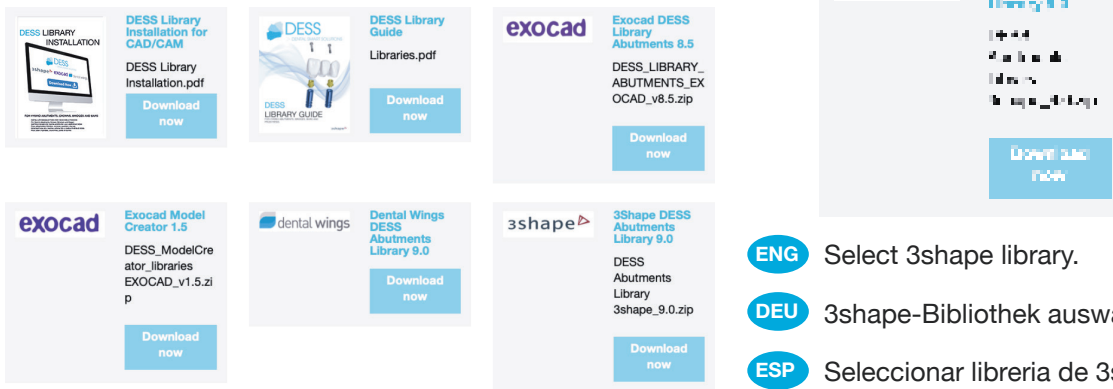


- ENG** Select 3shape library.
- DEU** 3shape-Bibliothek auswählen.
- ESP** Seleccionar librería de 3shape.
- FR** Sélectionner la bibliothèque 3shape.

3

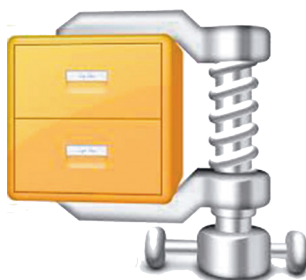


- ENG** Unzip the folder.
- DEU** Dekomprimieren Sie die Datei.
- ESP** Descomprima el archivo.
- FR** Dézipper le dossier.

4

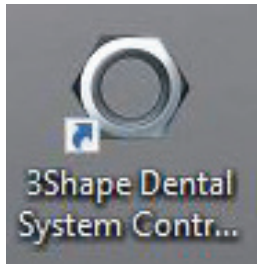


- ENG** Open the Dental System Control Panel.
- DEU** Starten Sie nun das Dental System Control Panel.
- ESP** Iniciar Dental System Control Panel.
- FR** Ouvrir le 3Shape Dental System Control Panel.

5

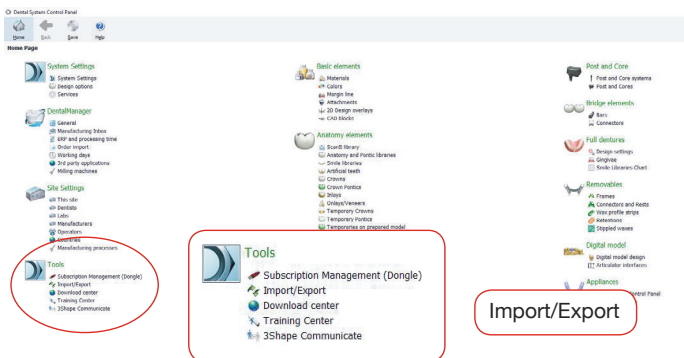


- ENG** Go to “Tools” → “Import/Export”.
- DEU** Und öffnen Sie das Verzeichnis
- ESP** Ir al apartado “Herramientas” → “Importar/Exportar”.
- FR** Et sélectionner “Outils” → “Importer/Exporter”.

6

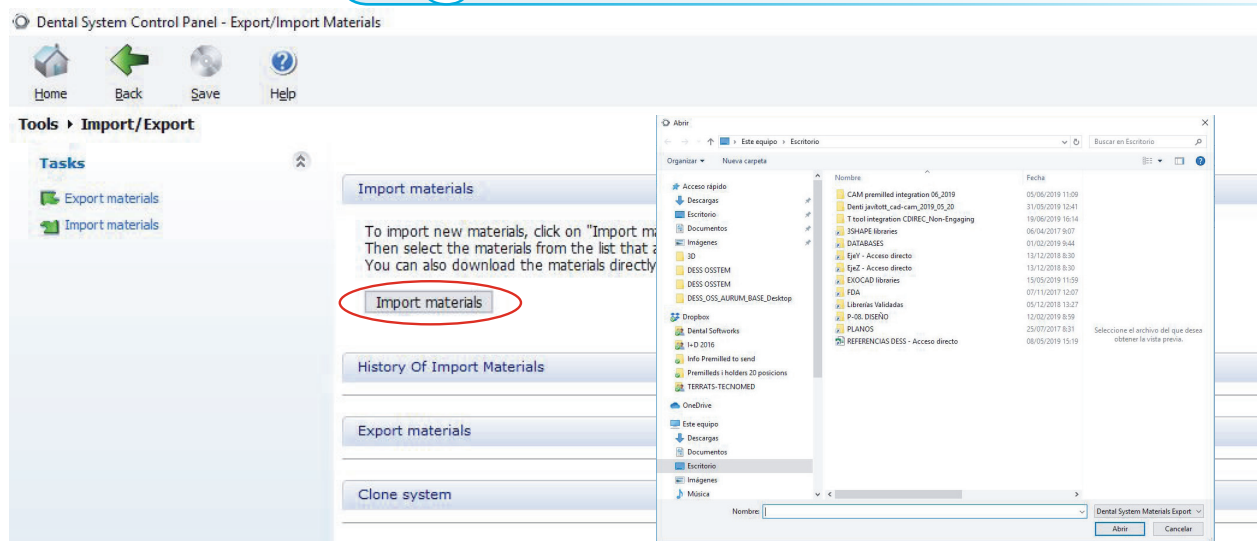

- ENG** Choose “Import materials”. Windows Explorer opens and you need to choose the unzipped .dme file.
- DEU** Wählen Sie “Materialen importieren”. Es öffnet sich der Windows Explorer. Wählen Sie die dekomprimierte .dme Datei zum Importieren aus.
- ESP** Seleccionar “Importar materiales”. Se abrirá un Explorador de Windows. Debemos seleccionar el archivo descomprimido .dme.
- FR** Choisissez “Importer matériaux”. Ce la ouvre l’explorateur Windows dans le quel vous devez électionner le fichier dézippé .dme.

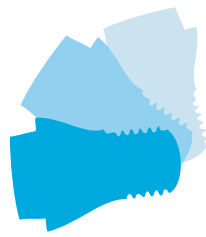


DESS

> DENTAL SMART SOLUTIONS

DESS LIBRARY INSTALLATION **exocad**

1

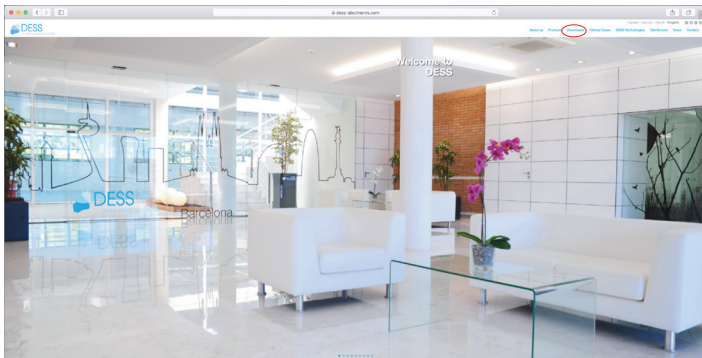

- ENG** Go to our website www.dess-abutments.com, once inside, select the download section.
- DEU** Gehen Sie auf unsere Website www.dess-abutments.com, sobald Sie sich dort befinden, wählen Sie den Download-Bereich.
- ESP** Vaya a nuestra página web www.dess-abutments.com, una vez dentro, seleccione la sección de descargas.
- FR** Rendez-vous sur notre site www.dess-abutments.com, une fois à l'intérieur, sélectionnez la section de téléchargement.


2

CAD CAM LIBRARIES

 DESS Library Installation for CAD/CAM DESS Library Installation.pdf Download now	 DESS Library Guide Libraries.pdf Download now	 Exocad DESS Library Abutments 8.5 DESS_LIBRARY_ABUTMENTS_EX OCAD_v8.5.zip Download now
 Exocad Model Creator 1.5 DESS_ModelCreator Libraries EXOCAD_v1.5.zip Download now	 Dental Wings DESS Abutments Library 9.0 Download now	 3Shape DESS Abutments Library 9.0 DESS Abutments Library 3shape_9.0.zip Download now


- ENG** Select exocad library.
- DEU** exocad-Bibliothek auswählen.
- ESP** Seleccionar librería de exocad.
- FR** Sélectionner la bibliothèque exocad.

3

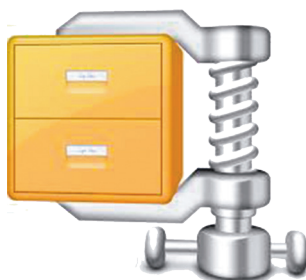

- ENG** Unzip the folder.
- DEU** Dekomprimieren Sie die Datei.
- ESP** Descomprima el archivo.
- FR** Dézipper le dossier.

4

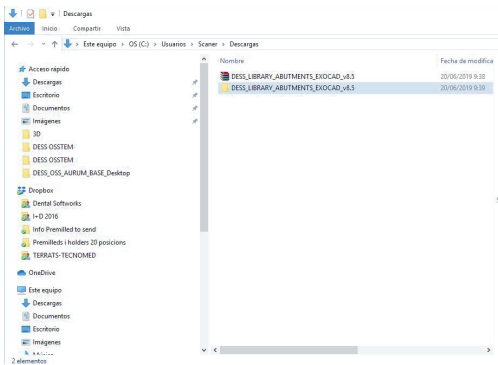



ENG We searched in downloads the folder exocad and opened it.

DEU Wir haben in Downloads nach dem Ordner exocad gesucht und ihn geöffnet.

ESP Buscamos en descargas la carpeta exocad y la abrimos.

FR Nous avons cherché dans les téléchargements le dossier exocad et l'avons ouvert.

5

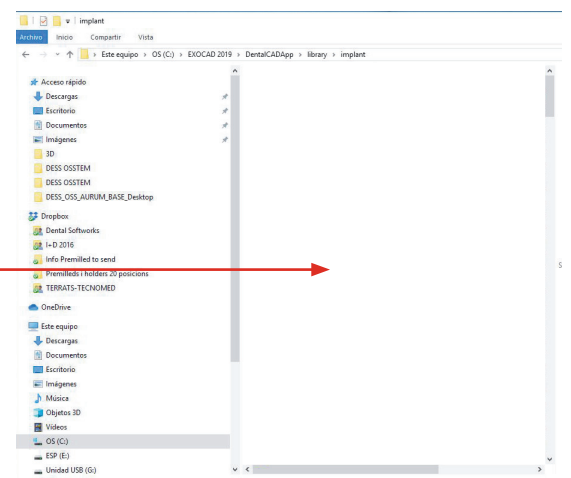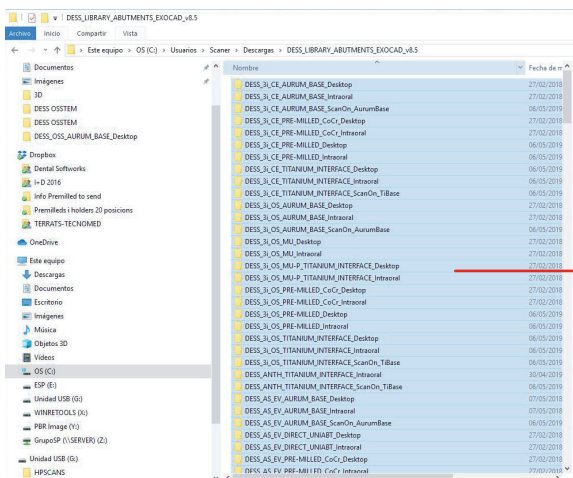


ENG Select all the folders and paste them in the following path: exocad / DentalCADApp/ library/implant.

DEU Wählen Sie alle Ordner aus und fügen Sie sie in den folgenden Pfad ein: exocad / DentalCADApp/ library/implantate.

ESP Seleccionamos todas las carpetas y las pegamos en la siguiente ruta: `exocad / DentalCADApp/ library/implant.`

FR Sélectionnez tous les dossiers et collez-les dans le chemin suivant : exocad / DentalCADApp/ library/implant.

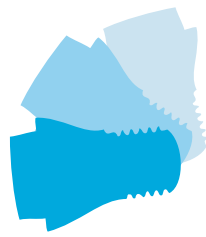


DESS

> DENTAL SMART SOLUTIONS

DESS MODEL CREATOR LIBRARIES **exocad**

1

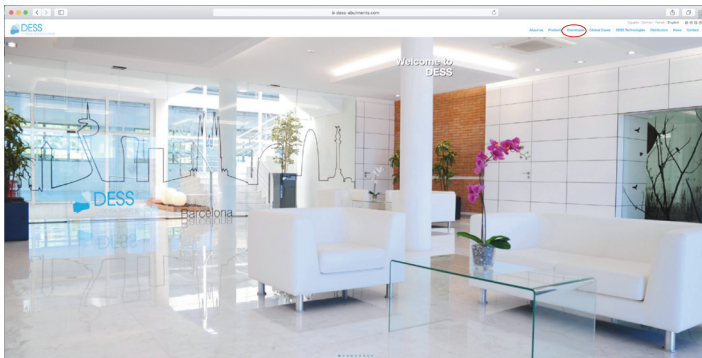

- ENG** Go to our website www.dess-abutments.com, once inside, select the download section.
- DEU** Gehen Sie auf unsere Website www.dess-abutments.com, sobald Sie sich dort befinden, wählen Sie den Download-Bereich.
- ESP** Vaya a nuestra página web www.dess-abutments.com, una vez dentro, seleccione la sección de descargas.
- FR** Rendez-vous sur notre site www.dess-abutments.com, une fois à l'intérieur, sélectionnez la section de téléchargement.


2

CAD CAM LIBRARIES

 DESS Library Installation for CAD/CAM DESS Library Installation.pdf Download now	 DESS Library Guide Libraries.pdf Download now	 Exocad DESS Library Abutments 8.5 DESS_LIBRARY_ABUTMENTS_EXOCAD_v8.5.zip Download now	 Exocad Model Creator 1.5 DESS_ModelCreator_libraries EXOCAD_v1.5.zip Download now
 Exocad Model Creator 1.5 DESS_ModelCreator_libraries EXOCAD_v1.5.zip Download now	 Dental Wings DESS Abutments Library 9.0 Download now	 3Shape DESS Abutments Library 9.0 DESS Abutments Library 3shape_9.0.zip Download now	


- ENG** Select exocad Model Creator.
- DEU** exocad Model Creator-Bibliothek auswählen.
- ESP** Seleccionar librería de exocad Model Creator.
- FR** Sélectionner la bibliothèque exocad Model Creator.

3

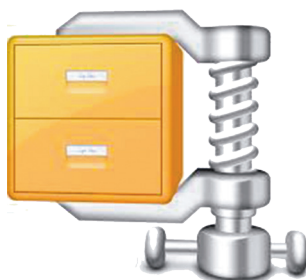

- ENG** Unzip the folder.
- DEU** Dekomprimieren Sie die Datei.
- ESP** Descomprima el archivo.
- FR** Dézipper le dossier.

4

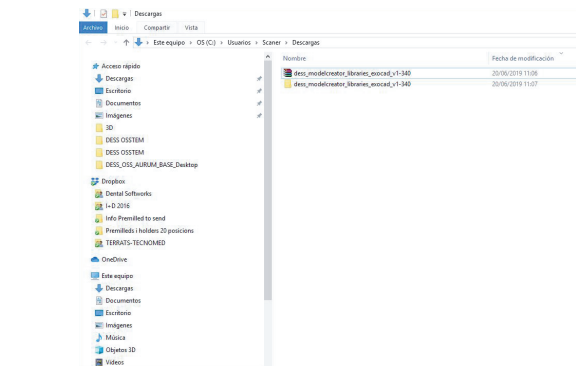



ENG We searched in downloads the folder exocad and opened it.

DEU Wir haben in Downloads nach dem Ordner exocad gesucht und ihn geöffnet.

ESP Buscamos en descargas la carpeta exocad y la abrimos.

FR Nous avons cherché dans les téléchargements le dossier exocad et l'avons ouvert.

5

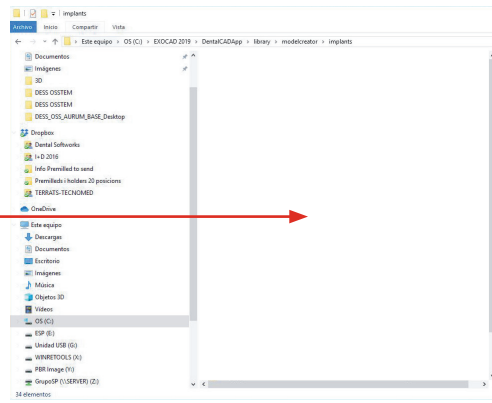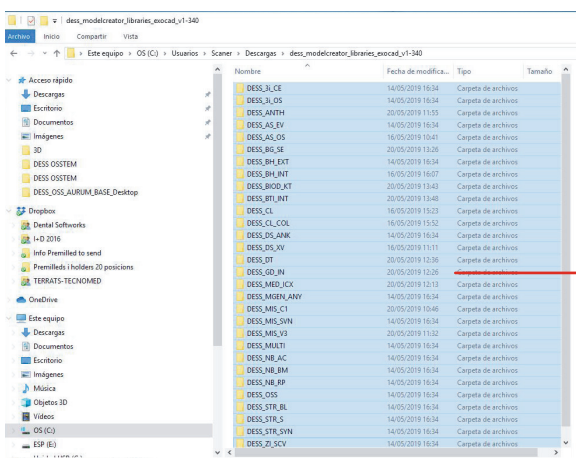


ENG Select all the folders and paste them in the following path: exocad / DentalCADApp/ library/modelcreator/implant.

DEU Wählen Sie alle Ordner aus und fügen Sie sie in den folgenden Pfad ein: exocad / DentalCADApp/ library/ modelcreator/implant.

ESP Seleccionamos todas las carpetas y las pegamos en la siguiente ruta: exocad / DentalCADApp/ library/ modelcreator/implant.

FR Sélectionnez tous les dossiers et collez-les dans le chemin suivant : exocad / DentalCADApp/ library/modelcreator/ implant.

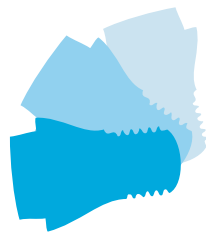


DESS

> DENTAL SMART SOLUTIONS

DESS LIBRARY INSTALLATION dental wings


1

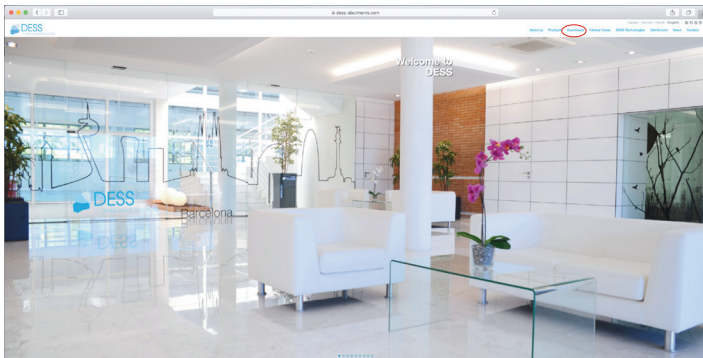

- ENG** Go to our website www.dess-abutments.com, once inside, select the download section.
- DEU** Gehen Sie auf unsere Website www.dess-abutments.com, sobald Sie sich dort befinden, wählen Sie den Download-Bereich.
- ESP** Vaya a nuestra página web www.dess-abutments.com, una vez dentro, seleccione la sección de descargas.
- FR** Rendez-vous sur notre site www.dess-abutments.com, une fois à l'intérieur, sélectionnez la section de téléchargement.


2

CAD CAM LIBRARIES

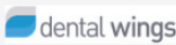 DESS Library Installation for CAD/CAM DESS Library Installation.pdf Download now	 DESS Library Guide Libraries.pdf Download now	 Exocad DESS Library Abutments 8.5 DESS_LIBRARY_ABUTMENTS_EXOCAD_v8.5.zip Download now	 Dental Wings DESS Abutments Library 9.0 Download now
 Exocad Model Creator 1.5 DESS_ModelCreator Libraries EXOCAD_v1.5.zip Download now	 Dental Wings DESS Abutments Library 9.0 Download now	 3Shape DESS Abutments Library 9.0 DESS Abutments Library 3shape_9.0.zip Download now	


- ENG** Select Dental wings library.
- DEU** Dental wings-Bibliothek auswählen.
- ESP** Seleccionar librería de Dental wings.
- FR** Sélectionner la bibliothèque Dental wings.

3

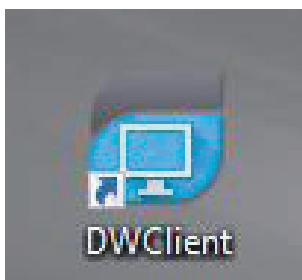


- ENG** Open DWClient.
- DEU** Öffnen DWClient.
- ESP** Abrir DWClient.
- FR** S'ouvrir DWClient.

4

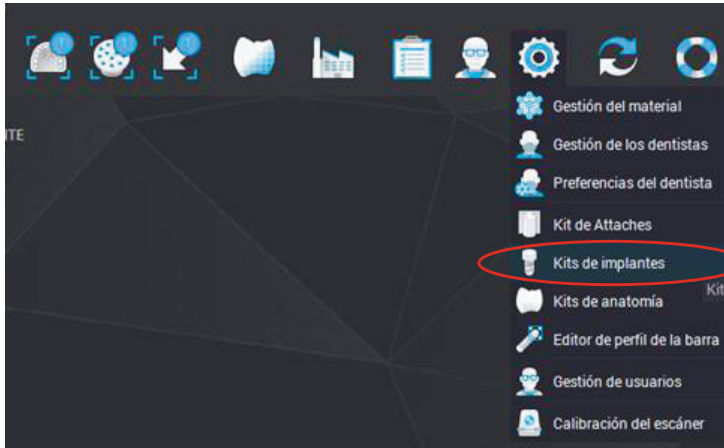


- ENG** Implant kits.
- DEU** Implantat-Sets.
- ESP** Kits de implantes.
- FR** kits d'implants.

5

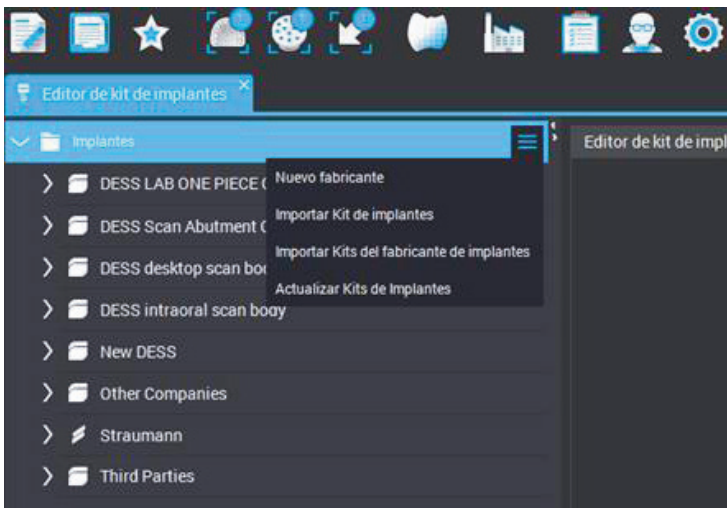


- ENG** Import Kits from the implant manufacturer.
- DEU** Importieren Sie Kits vom Implantathersteller.
- ESP** Importar Kits del fabricante de implantes.
- FR** Importer les kits du fabricant de l'implant.

6

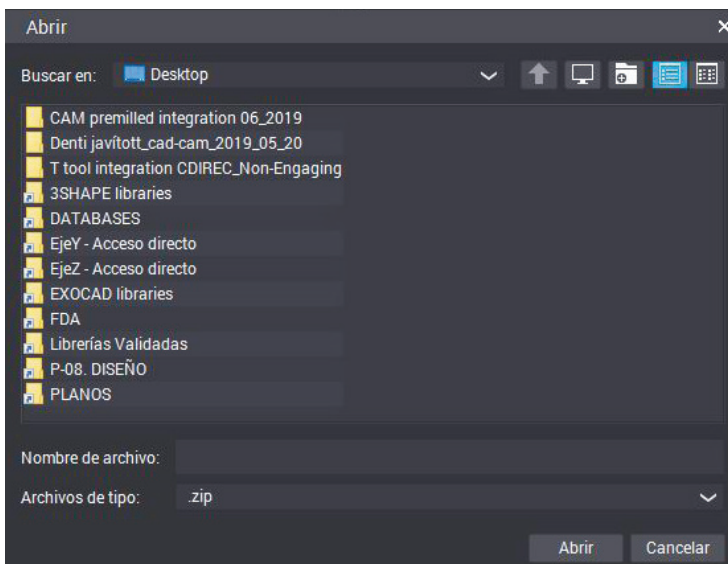

- ENG** Select Zip file and open.
- DEU** Wählen Sie Zip-Datei und öffnen Sie sie.
- ESP** Seleccionar archivo Zip. y abrir.
- FR** Sélectionnez Fichier Zip et ouvrez.

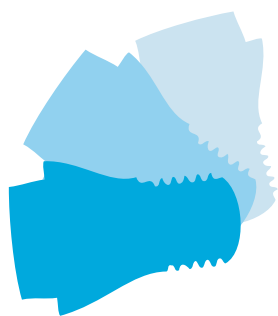

DESS

> DENTAL SMART SOLUTIONS

These instructions replace all previous editions. For any detailed information about DESS® products please contact your local distributor.

The photographs of the products are for information purposes only.

The type, reference and connection of each element should be checked. All DESS®

products are manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485

with CE marking for all products Class IIa. | 3i® and 3i® Certain®, Miniplant®, MicroMiniplant™ and Osseotite®

are registered trademarks of 3i Implant Innovations, USA | ASTRA TECH™,

OsseoSpeed™, ANKYLOS® C/X, XiVE® and FRIADENT® and UniAbutment®

are registered trademarks of DENTSPLY Implants | BioHorizons® registered trademark of BioHorizons, INC.

| Brånemark System®, NobelReplace® and Replace Select™

and NobelActive™ and NobelReplace® CC and NobelSpeedy™

and Multi-unit® registered trademarks of Nobel Biocare AB, Sweden | ITI®, Straumann®

and synOcta® registered trademarks of Straumann Holding AG, Switzerland | MIS® registered trademark

of MIS Implant Technologies Ltd | Zimmer Screw-Vent®

and SwissPlus® registered trademarks of Zimmer Dental INC, USA | Dyna® registered trademark

of Dyna Dental Engineering BV | Locator® registered trademark

of Zest Anchors INC. | 3Shape® is a registered trademark of 3Shape A/S | EXOCAD® is a

registered trademark of Exocad GmbH, Germany | Dental Wings® and DWOS®

are registered trademarks of Dental Wings, Inc.